

Diani Release 1.18 – Seznam viditelných změn

1. Vytváření / Úprava uživatele:

- Změna popisku výchozího pacienta na výchozí osobu.
- V rozlišení pro mobilní zařízení nešlo zaškrtnout checkbox pro přiřazení rolí.
- Registrační informace v podobě xml nahrazeny přehlednějším způsobem zobrazení.

Základní informace

Uživatelské jméno	marek.doksansky
Emailová adresa	a@a.cz
Křestní jméno	a
Příjmení	b
Datum narození	03.12.2017
Pohlaví	Nespecifikováno
Heslo	Změnit heslo

- Při výběru osoby se zobrazí její křestní jméno, příjmení a kód doktora.

Výchozí osoba

Jméno	Doktor OICT
Křestní jméno	Doktor
Příjmení	OICT
Kód doktora	11111111

2. Přihlášení

- Změna chování zobrazení hesla v login formu – s ohledem na mobilní zařízení se pro skrytí / odkrytí vyplněného hesla již nemusí myš přidršet.

Přihlášení

Uživatelské jméno

Heslo

Jazyk

Čeština ▼

Přihlásit

Projekt Diani

Webový portál Diani je součástí telemedicínského systému, který umožňuje sběr, zobrazení a analýzu dat z mnoha elektronických přístrojů používaných především pacienty s chronickými onemocněními (diabetem a hypertenzí). Systém momentálně slouží k edukačním a výzkumným účelům v oblasti self-managementu těchto pacientů. [Více informací](#)

Registrace

Přihlášením souhlasíte s našimi [Obecnými ustanoveními](#) a [ochranou osobních údajů](#).


3. Pohyb při měření

- Přidání červeného podbarvení u nolových kroků

Čas	STK	DTK	TF	Arytmie	Aktivita	Kroky	Doba bez kroků [min]
2. 11. 2018 14:00	126	88	68	Ano	30,6	0	15+
2. 11. 2018 14:32	132	82	65	Ne	25,6	0	9
2. 11. 2018 14:51	123	80	65	Ne	16,4	0	15+
2. 11. 2018 15:40	142	88	71	Ne	36,4	42	2

4. Přehled grafů hypertenze

- Denní profil (denní náhled): přidání seznamu všech denních profilů nad grafy s možností přepínání mezi profily

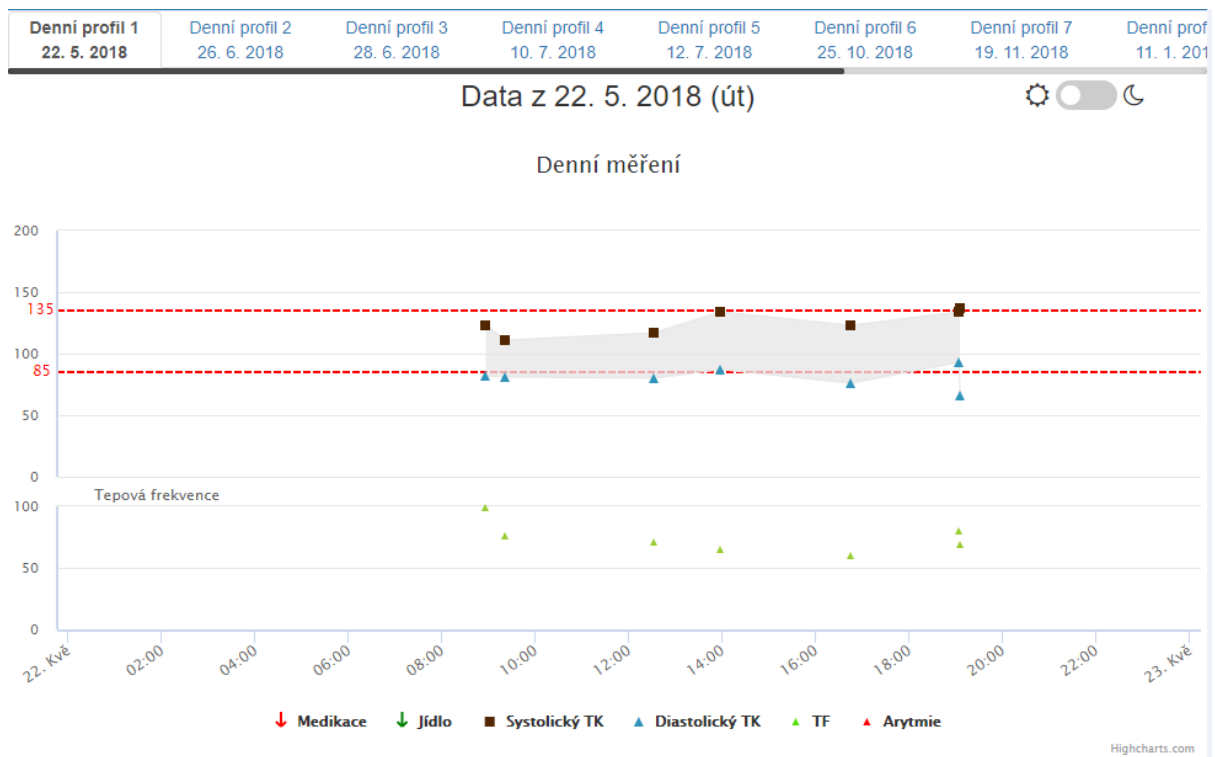

5. Chat

- Přidán separátor dnů v podobě názvu dne.



6. Vytváření / Editace pacienta

- Automatické skládání zobrazovaného jména z křestního jména a příjmení. Formát (příjmení křestní jméno).
- Oprava výběru skupiny pacienta. Dříve byla předvybrána první skupina a nebylo možné nechat výběr skupiny nevyplněný.

Přidat pacienta

Křestní jméno	Křestní jméno
Příjmení	Příjmení *
Skupiny pacientů	Není vybráno
Datum narození	Datum narození
Rodné číslo	Rodné číslo
Zobrazované jméno	Zobrazované jméno *
Poznámka	Poznámka
Pohlaví	☒ Nespecifikováno ☐ Muž ☐ Žena
Přidat pacienta	

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

7. Správa zařízení (new)

- Administrace -> Správa zařízení

Vytvořit nové zařízení

Název zařízení	Název zařízení
Kód	Kód
Sériové číslo	Sériové číslo
MAC adresa	MAC adresa
Typ zařízení	Xiaomi MiBand 2
Vytvořit	

Seznam zařízení

Typ zařízení

Sériové číslo nebo MAC adresa

Hledej

Název zařízení	Kód	Typ zařízení	Sériové číslo	MAC adresa	Aktivní	
Xiaomi MiBand 2	110-1	Xiaomi MiBand 2		00:00:00:00:30:39	Ano	<button>Upravit</button>
Xiaomi MiBand 2 - 44	110-2	Xiaomi MiBand 2		00:00:00:01:E0:F3	Ano	<button>Upravit</button>

8. Správa osob (new)

- Administrace -> Správa osob

Vytvořit novou osobu


Křestní jméno	Křestní jméno	
Příjmení	Příjmení	*
Zobrazované jméno	Zobrazované jméno	*
Kód doktora	Kód doktora	
Vytvořit		

Seznam osob

Zobrazované jméno	Křestní jméno	Příjmení	Kód doktora	
00 Zelinova Michaela	Michaela	00 Zelinova		Upravit
44		44		Upravit
AA Diani	AA	Diani		Upravit
AA Intersystems	AA	Intersystems		Upravit
aaa aaa aaaa	aaaa	aaa		Upravit
adfa asfdD qwdfqsfasf	qwdfqsfasf	adfa		Upravit
Akotia Devang	Devang	Akotia		Upravit
Ali A360		Ali A360		Upravit
Ali A600		Ali A600		Upravit

9. Obecné

- Přidána možnost přepnout denní grafy do nočního zobrazení.

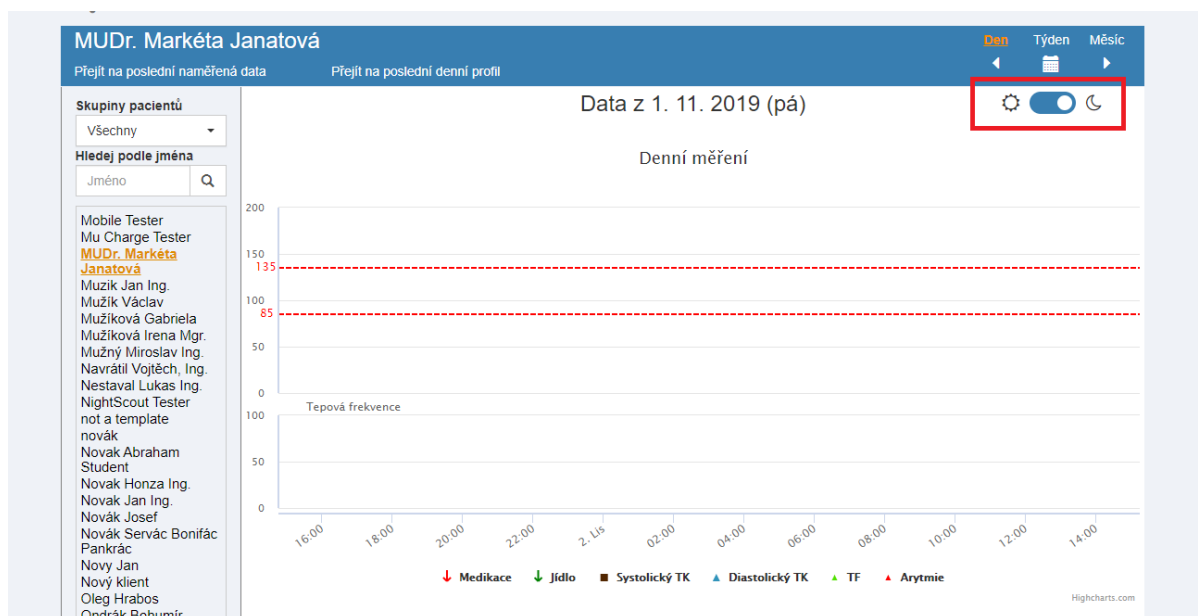

Změny 14.1.2020 – 10.2.2020

10. Nejvíce angažovaní pacienti (new)

- Výzkum -> Nejvíce angažovaní pacienti.
- Zobrazuje se počet naměřených dat z daného období a modulu.
- Možnost výběru časového intervalu pro generování.
- Možnost řadit sloupce.
- Po kliknutí na číselné údaje v tabulce následuje přesměrování na relevantní data.

Nejvíce angažovaní pacienti						
Od: 04.02.2020		Do: 10.02.2020		Dní: 7 Vytvořit		
Zobrazované jméno	Diabetes	Hypertenze	Fyzická aktivita	Váha	Dotazník	
Sosnovcová Eva	0	64	108	0	0	
Masec Frant	0	116	47	0	0	
Hattlman Veleislav	0	84	73	0	0	
Veselovský Lubomír	0	36	120	0	0	
Rozehnalová Blanka, JUDr.	0	84	54	0	0	
Langer Radek	0	78	48	0	0	
Kolář Zdeněk, Ing.	0	84	38	0	0	
Bykovská Karina	0	0	119	0	0	
Kalistová Marcela	0	84	31	0	0	
Bouchal Ladislav	0	64	44	0	0	
Holas Petr	35	0	73	0	0	
Kučerová Dagmar	0	40	58	0	0	
Tůma Pavel	0	84	14	0	0	
Juříčková Veronika	0	48	43	0	0	
Ždanský Martin	0	0	90	0	0	
Podhorecká Věra	59	0	29	0	0	
GAUK2017003	25	0	61	0	0	
Valdman Stanislav	0	51	34	0	0	
Schmiedt Lukáš, Mgr.	0	40	41	0	0	
Nováková Ivana	1	0	72	0	0	

11. Hypertenzní záznamník

- Přidána detekce kroků před měřením.
- Po najetí myší na obrázek stop se zobrazí počet detekovaných kroků.
- Obrázek stop přidán do legendy.
- Obrázek stop přidán dopředu exportu.

2. Den Datum: (Den/Měsíc/Rok)	Ráno:	07:31	1	123	82	92	Vložit poznámku			
		07:33	2	127	82	92	07:34	129	83	88
středa 05.02.2020	Večer: (5x)	20:10	1	130	82	83	Vložit poznámku			
		20:12	2	123	82	86	20:13	126	77	86
3. Den Datum: (Den/Měsíc/Rok)	Ráno: (4x)	07:07	1	124	82	82	Vložit poznámku			
		07:08	2	132	86	83	07:10	126	70	80
čtvrtek 06.02.2020	Večer:	19:47	1	134	87	93	Vložit poznámku			
		19:50	2	125	81	85	19:52	126	78	87

12. Propojení s Fitbitem

- Pokud nemá uživatel přiřazený Fitbit, zobrazí se upozornění.

Propojit s Fitbitem

Namáte přiřazený Fitbit. Prosím kontaktujte vašeho doktora, nebo administrátora.

- Pokud se uživatel snaží spárovat účet, který již je přiřazen k jinému boxu, zobrazí se upozornění.
- Propojení s Fitbitem nově skryto pro doktory a zobrazeno pro pacienty.
- Možnost aktualizovat již existující přiřazení daného fitbit accountu k danému boxu.

13. Obecné

- Upraven text v upozornění na odhlášení uživatele, kvůli dlouhé neaktivitě. Text změněn na „Byli jste odhlášeni z důvodu neaktivity (xxxmin). Přihlašte se prosím znovu.“